




ラボ用ガラス器具洗浄機 設置・施工手順書

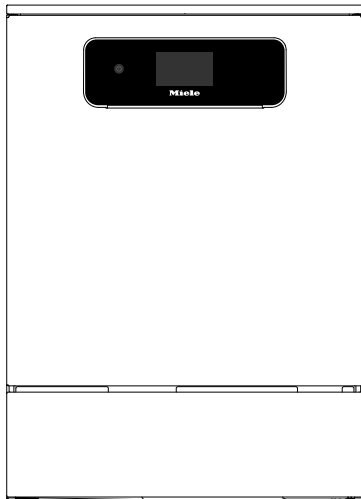

PLW 8683

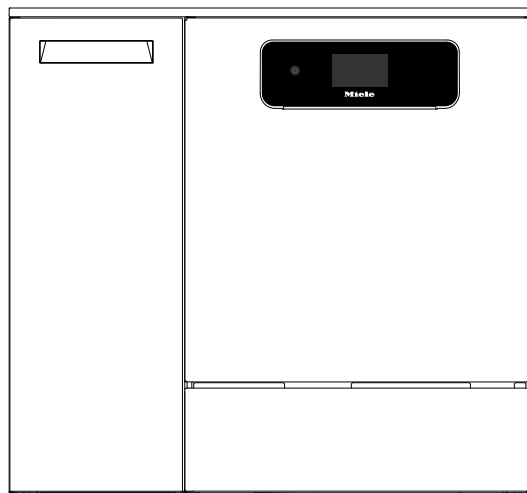

PLW 8683CD

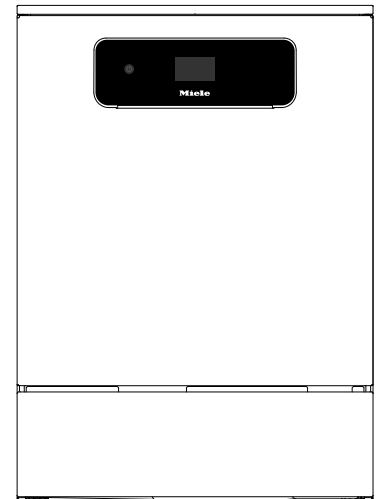

PLW 8604

- この設置・施工手順書では、人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 設置・施工において、設置・施工手順書に従わなかったために生じた故障・事故などについては責任を負いかねます。

ミーレ・ジャパン株式会社

〒153-0063

東京都目黒区目黒 1-24-12

オリックス目黒ビル 4 階

1 安全上のご注意

この設置・施工手順書では、次のマークの箇所で人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。		お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。	
 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある」内容です。		してはいけない内容です。
 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある」内容です。		実行しなければならない内容です。

※ 設置・施工手順書と設置プランに従わなかったために生じた故障・事故などについては責任を負いかねます。

2 設置上のご注意（所要設備・電源）

警告

 実行しなければならない内容です。	● 電源：単独回路で漏電遮断器（検知電流：30mA）を必ず設置してください。 ● 給水水圧 0.2 - 1.0MPa 水温 冷水 5 - 20℃ 温水 5 - 65℃ 脱塩水 5 - 20℃ ● ラボ用ガラス器具は全てポンプによる強制排水方式です。（揚程 1m） 排水管は必ず 300mm 以上立ち上げてください。 ● 給水バルブはユーザーが容易に操作できるような向きで取り付けてください。 ● 電源工事や接地工事は電気設備技術基準に準じて行ってください。 ● 機器からは熱湯が排水されます。 排水管は耐熱塩ビ管 HT を使用してください。 ※ 耐熱排水管を使用しないと、配管が破損するおそれがあります。 （・排水管 HT40・HT エルボ・HT チーズ） ● 排水工事はすべて水道法、建築基準法、および貴都市の条例、規定に準じて行ってください。	● 設置床面は水平・平坦にし、後で本体を手前にひきだせるようにしておいてください。 ● 設置に関わる仕様に関しては、機器に同梱されている設置プランに従ってください。
	 してはいけない内容です。	● 電源コードを切断、直結することはしないでください。 ● 凍結の恐れがある場所（室温 0℃以下）には設置しないでください。



3 PLW 8683・PLW 8683CD の設置の所要設備 (電源・給排水管配置)

専用回路の設置

■ 漏電遮断器 (検知電流 30mA) 付 3 相 200V・20A 専用回路

※ 単相でご使用の際は販売店までお問い合わせください。

コンセント形状 

三相 200V/50Hz/20A

三相 200V/60Hz/20A

明工社 MR2749 と同等品

給排水管の配置



PLW86xx からは熱湯が排水されます。
排水管は耐熱塩ビ管 HT を使用してください。
耐熱排水管を使用しないと、
配管が破損するおそれがあります。
(・排水管 HT40・HTエルボ・HT チーズ)

すすぎ水を使用する場合 (給水管×3*)


- 給水管 × 3 * : G3/4 内ネジ止水栓
機器底面から 500mm
- 排水管 : 耐熱塩ビ管 40 Φ (HT40 相当)
機器底面から 300mm

※ ページ 1 の  警告を参照して下さい。

* 脱塩水加圧供給時



架台に乗せる場合も給排水・
電源の高さは機器底面から
指定の高さを確保してください。

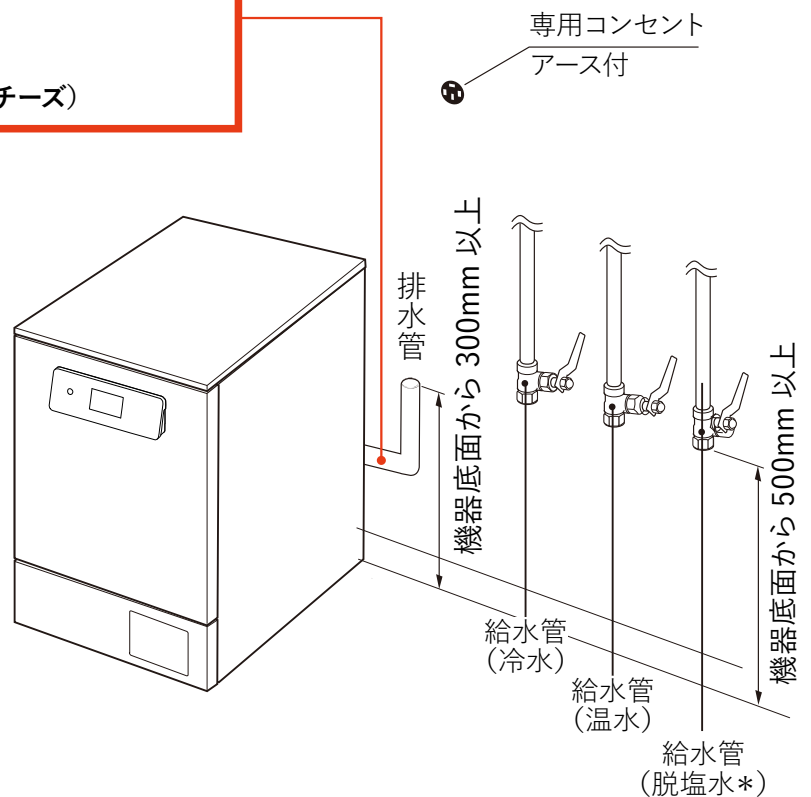

4 PLW8683・PLW8604・PLW8683CD の接続*


1. 電源の接続

電源コードを専用電源に接続します。


2. 給排水の接続*

給水ホースの給水電磁弁（WPS）は上向きに接続することを推奨します。

（給水管下図を参照）

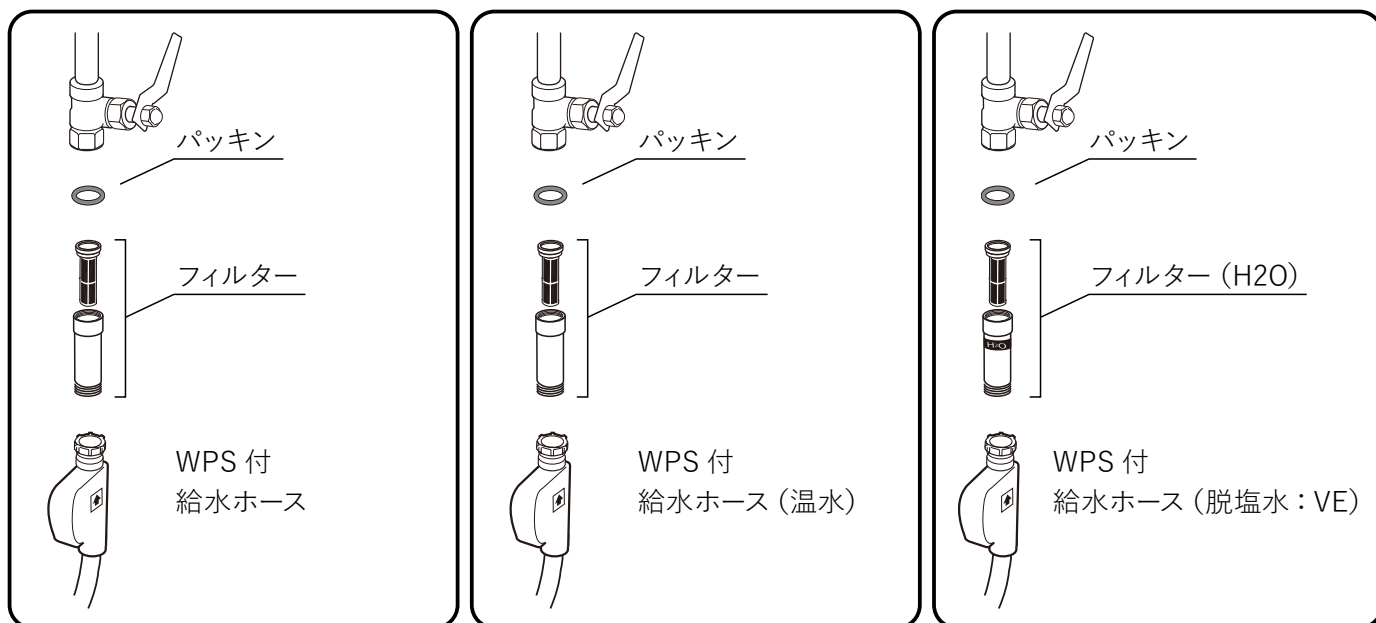

- 排水ホースは、抜けないようにビニールテープで固定し、排水管内の陰圧を防ぐために通気されるよう接続してください。

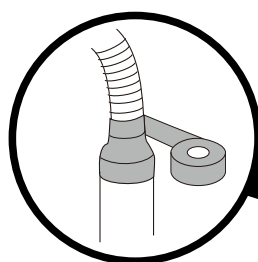

注：陰圧を防ぐために
すき間を設けること

専用コンセント
アース付

給水管
（冷水）

給水管
（温水）

給水管
（脱塩水*）



排水
管

注：図は説明のため、
指定の寸法よりも離して描かれています

* 脱塩水加压供給時
ガラスドア仕様（標準）、ステンレスドア（オプション）

外形寸法図
ラボ用ガラス器具洗浄機
型式：PLW 8683

標準 ステンレスドア仕様

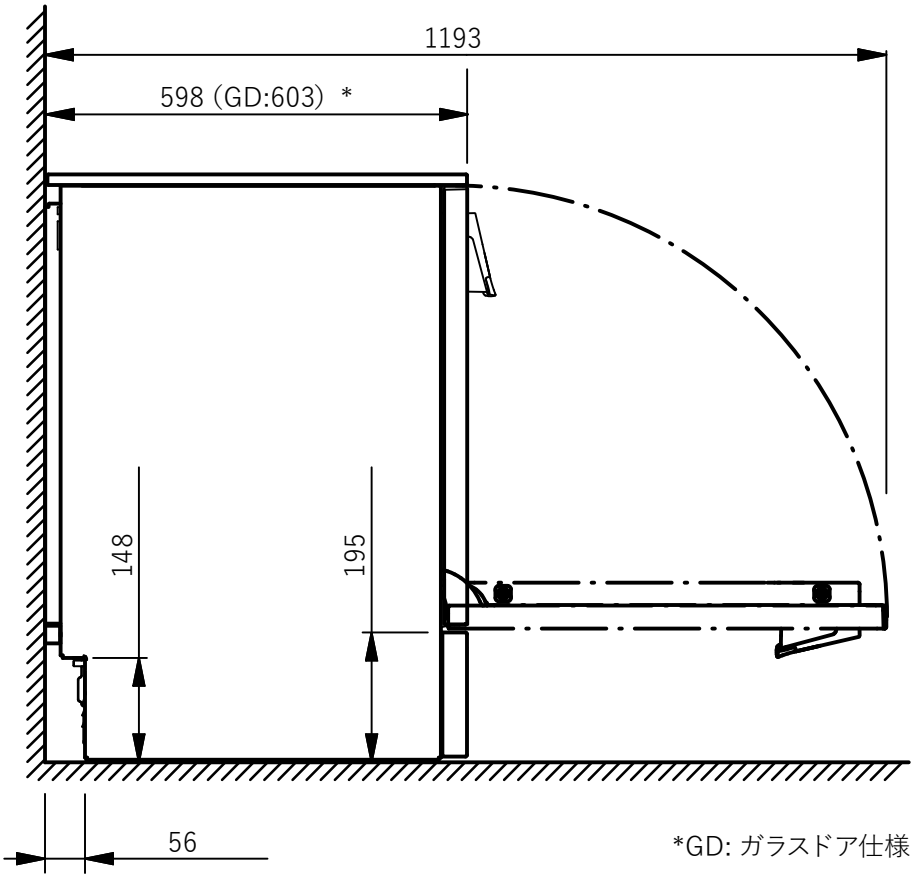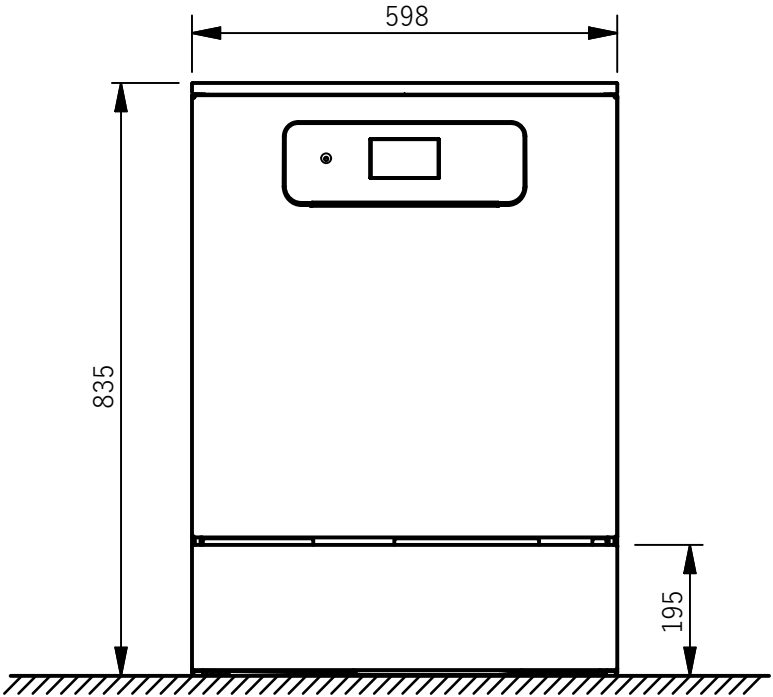


*GD: ガラスドア仕様

外形寸法図


ラボ用ガラス器具洗浄機

型式：PLW 8683CD

標準 ステンレスドア仕様

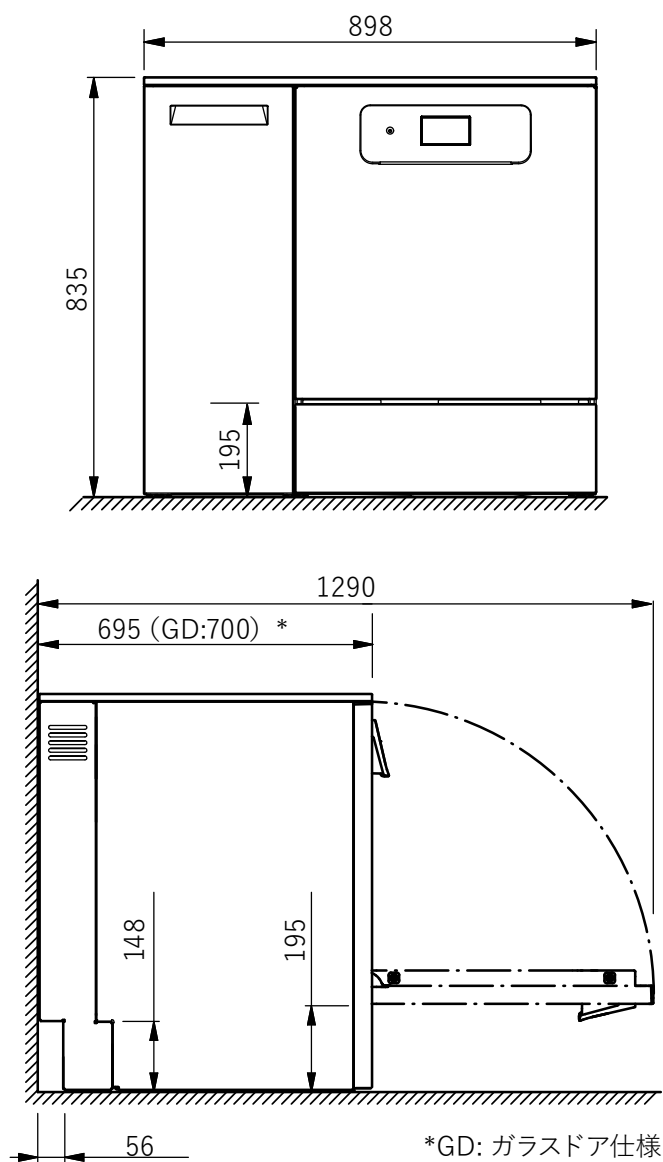

機器背面のホース類の位置と長さ (図は PLW 8683CD)

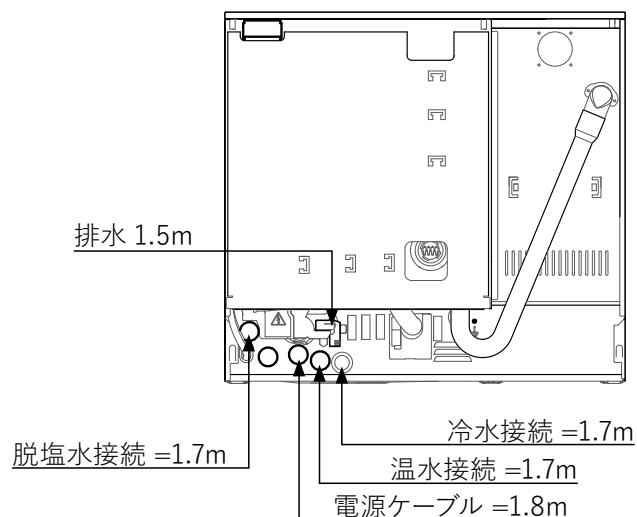

外形寸法図
ラボ用ガラス器具洗浄機
型式：PLW 8604

